

# 赛瑞特™ 产品目录

## 生物垃圾袋/高压灭菌袋系列



**BURN WITHOUT OP!**

**Seroat**  
INTERNATIONAL

**LAB-BAG™  
AUTOCLAVE BAG**

**Warning**  
Bags of bag should be disposed  
and should be left open to allow sterilization of waste.

**Instructions**  
1. Do not use for...  
2. Do not use for...  
3. Do not use for...  
4. Do not use for...  
5. Do not use for...  
6. Do not use for...  
7. Do not use for...  
8. Do not use for...  
9. Do not use for...  
10. Do not use for...

**hazardous waste**  
INFECTIOUS LINEN

**BIOHAZARD**

**Seroat**  
INTERNATIONAL

## 关于我们

美国Seroat 赛瑞特，是1989年由Tanvi Trehan博士创建的家族企业，坐落在美国加州埃斯孔迪多，至今一直专注于实验室专用袋、塑料器材的生产及研发。Tanvi Trehan博士及其团队在美国从事本行业有着30多年的经验，在产品设计、开发、制造、应用上有领先的技术优势，在特拉华州与墨西哥分别占地900平米生产基地，工厂拥有多条高速全自动化生产线及强大的制造能力。其品牌Lab- Bag™系列产品在欧美市场得到了诸多工业领域的认可，同时，Seroat一直为全球200多家实验室产品领域的知名企业以OEM或ODM形式生产，产品深受信赖。目前已是全球最大的实验室专用袋的制造商之一。我们致力于帮助客户让世界更健康、更环保、更科学。



生物标本袋系列



高压灭菌袋系列



化学处理袋系列



无菌采样袋系列



无菌均质袋系列



更健康




更环保



更科学

赛瑞特 M-BAG™ & LAB-BAG™ 高压灭菌袋，是一种用于盛放和灭菌实验室生物废弃物、器具的容器。由不同的材质和特殊工艺制造，可适用于多种温度的湿热灭菌或热空气灭菌，取用方便，颜色醒目，易识别。用于盛放生物实验废弃后的培养皿、培养瓶、管、吸头、移液管、阳性样品等实验室器具、耗材，并经灭菌后丢弃，大大降低了潜在的生物危害，为您创造安全卫生的工作环境，助力安全环保事业。

- 特殊改良材质，耐高温持久
- 多种尺寸、不同颜色可选
- 带印刷、不带印刷可选
- 机械强度高，坚韧、耐穿刺
- 两种灭菌指示功能可选
- 可在脉动真空下湿热灭菌
- 耐高温蒸汽121℃ | 134℃ | 146℃
- 共挤出工艺，两侧无封口
- 卷连式包装，取用方便
- 耐高温印刷图案，防掉色
- 底部宽型封口，防漏抗冲击
- ASTM及EN13432标准认证

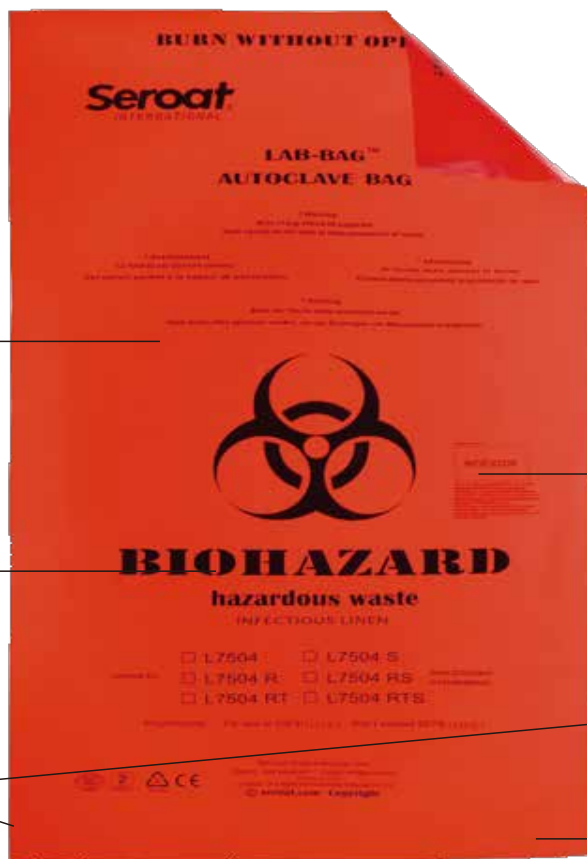

四国语音操作提示

印刷清晰，耐高温油墨不掉色

共挤出工艺，两侧无封口  
避免侧漏

特殊材质，机械强度高

灭菌指示功能（可选）  
PrintInk® & R-Tape®

宽型高频封口，牢固防漏



赛瑞特推出的经济型M07系列生物废弃物处理袋，采用高品质特殊聚乙烯材质，柔韧性好、一次成型、两侧无焊接，底部宽型封口设计，承重力好，降低了危险品渗漏的风险。

主要适用于生物废弃物的盛放、转移掩埋或焚烧处理，也可用于传统湿热灭菌（121℃，20min），一次性使用，不得重复。可选择带有灭菌指示功能（PrintInk® 油墨型）的处理袋，在袋身上可快速观察是否经过灭菌处理，是工业生物实验室中废弃物处理的理想选择。

### 优势

- 机械强度适中，经济实惠，适合盛放和转移生物废弃物
- 可承受高温高压121℃(250°F)湿热灭菌（脉动真空式除外）
- 印刷醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准
- 橘红色、黄色两种可选，便于分类处理
- 卷连式包装，取用方便，可选配封口绳

### 应用

适用于制药、生物、食品工业实验室的生物废弃物盛放或灭菌处理（仅限常规废弃物与非尖锐性耗材，如培养皿、培养瓶、试管和少量阳性样液等）



### 订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758S	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755S	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754S	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



### 订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759Y	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758Y	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758YS	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757Y	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756Y	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755Y	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755YS	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754Y	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754YS	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759R	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758R	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758RS	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757R	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756R	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755R	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755RS	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754R	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754RS	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759YR	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758YR	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758YRS	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757YR	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756YR	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755YR	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755YRS	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754YR	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754YRS	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



注: S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



高压灭菌除臭剂



桌上型支架



落地型支架



高压灭菌桶

L65系列 (121℃) 是赛瑞特公司废弃生物处理袋经典型产品之一, 由原高密度聚乙烯、Exceed™ 茂金属特殊复合材料制成, 具有较高的机械强度, 且耐温更持久。它同样适用于高压蒸汽灭菌和脉动真空式灭菌, 完全耐受121℃ (250°F) 高温蒸汽, 它也可以重复利用 (灭菌非一次性容器和其它工具等)。其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准, 并已通过美国材料与试验协会ASTM认证。

优势

- 具有更高的机械强度, 坚韧、防扎, 坚固耐用
- 耐受部分弱酸碱性的生物废弃物
- 持续性耐温更久, 可承受最高125℃ (257°F), 103.4kPA的蒸汽压力
- 带醒目的生物安全标识, 符合美国OSHA标准, 印有多国语言提示操作
- 半透明色, 提供多种尺寸的袋子, 满足不同的需求
- 卷连式包装设计, 存放、取用更方便
- 可选配专用封口绳, 用于丢弃前封口处理

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物实验室所有常规废弃物的灭菌, 如: 培养皿、动物笼、移液管、吸头、培养瓶、弱酸碱样液等



订货信息

半透明

L6500	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501S	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502S	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503S	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504S	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505S	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500N	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501N	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501NS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502N	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502NS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503N	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503NS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504N	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504NS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505N	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505NS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



注: S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk® & R-Tape®使生物废弃物处理更安全，更高效！


PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500R	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501R	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501RS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502R	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502RS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503R	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503RS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504R	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504RS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505R	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505RS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case

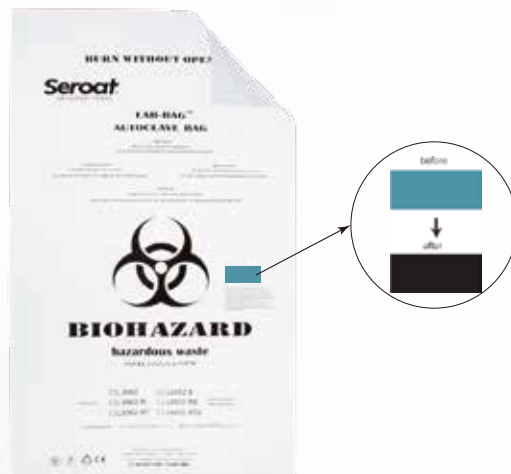


R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500RT	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501RT	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501RTS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502RT	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502RTS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503RT	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503RTS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504RT	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504RTS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505RT	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505RTS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case

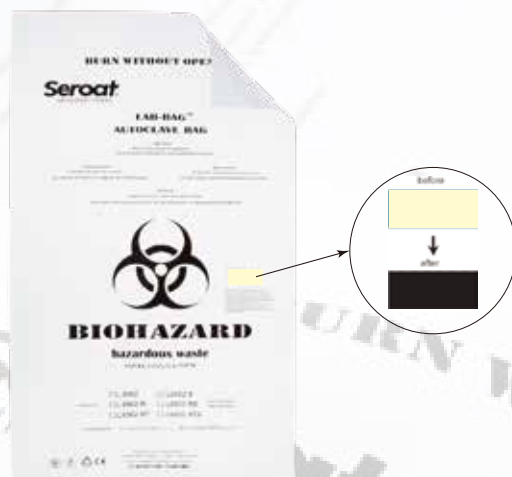

注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

使用小提示：

此系列的灭菌袋在使用过程中，请勿扎紧袋口，让高压蒸汽快速进入袋内使灭菌更彻底，灭菌温度不得超过125℃（257°F）。在使用带有PrintInk®&R-Tape®的高压灭菌袋时，请注意不要超出有效期。

L75系列是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一，由Exceed™茂金属、PE-HD复合作而成，特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比，具有更高的机械强度、耐持续高温等显著特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器，也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌，完全耐受121℃，其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准，并已通过美国材料与实验协会ASTM认证。

### 优势

- 卓越的机械强度，通过ASTM抗压及抗撕裂测试，坚韧、防扎，坚固耐用
- 耐持续性高温，可承受最高125℃（257°F），103.4kPA的蒸汽压力
- 带醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准，印有多国语言提示操作
- 提供两种颜色、多尺寸的袋子，满足不同的需求
- 卷连式包装设计，存放、取用更方便
- 可选配专用封口绳，用于丢弃前封口处理

### 应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌，如：培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等



### 订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500S	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501S	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502S	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503S	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504S	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505S	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506S	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



### 订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500Y	10×14in	254×356mm	2.5mil	0.060mm	3L	500/Case
L7500YS	10×14in	254×356mm	2.5mil	0.060mm	3L	250/Case
L7501Y	12×18in	300×450mm	2.5mil	0.060mm	8L	500/Case
L7501YS	12×18in	300×450mm	2.5mil	0.060mm	8L	250/Case
L7502Y	14×22in	356×560mm	2.5mil	0.060mm	12L	500/Case
L7502YS	14×22in	356×560mm	2.5mil	0.060mm	12L	250/Case
L7503Y	18×28in	460×710mm	2.5mil	0.060mm	22L	500/Case
L7503YS	18×28in	460×710mm	2.5mil	0.060mm	22L	250/Case
L7504Y	20×33in	510×838mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L7504YS	20×33in	510×838mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L7505YS	28×38in	720×970mm	2.5mil	0.060mm	62L	250/Case
L7506YS	33×43in	840×1100mm	2.5mil	0.060mm	89L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷




PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500R	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500RS	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501R	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501RS	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502R	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502RS	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503R	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503RS	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504R	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504RS	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505RS	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506RS	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case

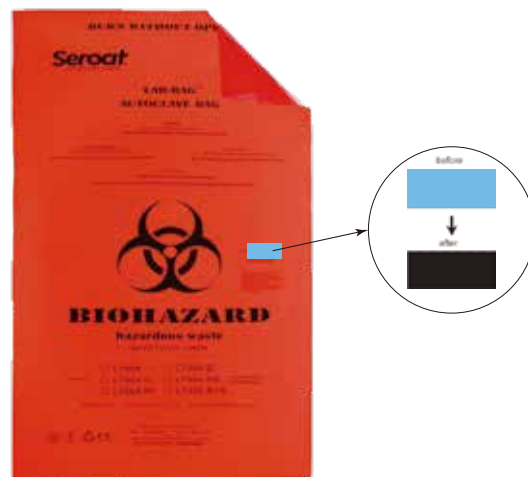

R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500RT	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500RTS	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501RT	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501RTS	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502RT	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502RTS	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503RT	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503RTS	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504RT	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504RTS	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505RTS	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506RTS	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



注: S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

使用小提示:

此系列的灭菌袋在使用过程中，请勿扎紧袋口，让高压蒸汽快速进入袋内使灭菌更彻底，灭菌温度不得超过125℃（257°F）。在使用带有PrintInk®&R-Tape®的高压灭菌袋时，请注意不要超出有效期。

L85系列 (134℃) 是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一, 由PP与M-PP增强复合作, 具有较高的机械强度与热变形温度, 能耐受134℃ (274°F) 持续性高温蒸汽, 同时它可以耐受弱酸碱性的生物样液, 其各项强度指标符合美国各州标准, 并已通过美国材料与试验协会ASTM认证。

### 优势

- 耐磨度与机械强度高, 坚韧、防扎, 坚固耐用
- 耐持续性高温, 可承受最高140℃ (285°F)
- 热变形温度高, 灭菌实验器具时可以重复使用
- 符合ASTM-D1709-85标准, 通过165g抗镖冲测试
- 带醒目的生物安全标识, 符合美国OSHA标准, 印有多国语言提示操作
- 可选配有专用的弹性封口安全夹, 用于灭菌时蒸汽排放和丢弃前封口

### 应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌, 如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品、实验笼、试管架、敷料镊等器具耗材



### 订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501S	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502S	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503S	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504S	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505S	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506S	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



### 订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501N	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501NS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502N	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502NS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503N	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503NS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504N	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504NS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505N	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505NS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506NS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



注: S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。请在使用时注意PrintInk®油墨是否超过有效期。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501R	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501RS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502R	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502RS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503R	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503RS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504R	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504RS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505R	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505RS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506RS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm </td <td>70L</td> <td>250/Case</td>	70L	250/Case



R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。请在使用时注意R-Tape胶条是否超过有效期。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501RT	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501RTS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502RT	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502RTS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503RT	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503RTS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504RT	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504RTS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505RT	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505RTS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506RTS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



注: S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



L95系列 (146°C) 是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一，由高强度的尼龙材料制成，透明色。主要用于热空气灭菌(146°C/295°F)，也可用于高压蒸汽灭菌 (134°C/274°F)，并可重复使用（灭菌非一次性容器和其它工具等），同时可耐受酸碱生物样液，其各项强度指标符合美国各州标准，并通过美国材料与试验协会ASTM认证。

### 优势

- 具有更高的机械强度，坚韧、防扎，坚固耐用
- 持续性耐温更久，可承受146°C (295°F) 热空气灭菌
- 符合ASTM-D1709-85标准，通过165g抗镖冲测试
- 特殊材质，热变形温度高，灭菌实验器具时可以重复使用
- 带醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准，印有多国语言提示操作
- 透明色，多种尺寸，无印刷可选，满足不同的需求
- 配有专用封口绳，用于丢弃前封口处理

### 应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、生物实验室所有常规废弃物的热空气灭菌或高压蒸汽灭菌，如：实验笼、试管架、敷料镊等金属器具或培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等废弃物耗材



### 订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500S	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501S	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500Case
L9502S	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500Case
L9503S	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504S	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505S	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case



### 订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500N	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500NS	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501N	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501NS	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502N	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500Case
L9502NS	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503N	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500Case
L9503NS	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504N	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504NS	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505NS	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。请在使用时注意PrintInk®油墨是否超过有效期。

订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500R	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500RS	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501R	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501RS	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502R	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500/Case
L9502RS	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503R	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500/Case
L9503RS	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504R	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504RS	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505RS	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case




R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。请在使用时注意R-Tape®胶条是否超过有效期。

订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500RT	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500RTS	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501RT	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501RTS	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502RT	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500/Case
L9502RTS	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503RT	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500/Case
L9503RTS	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504RT	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504RTS	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505RTS	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case

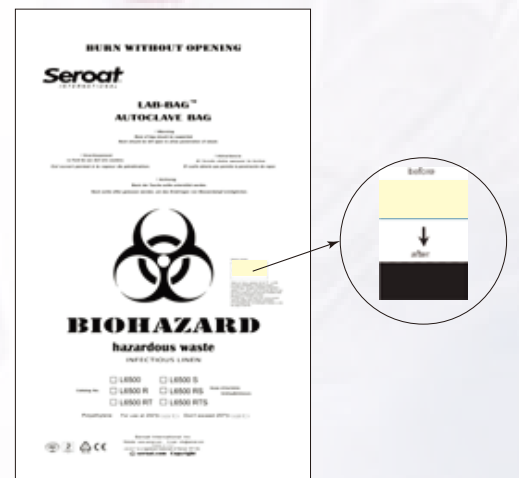

注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

# 生物废弃物处理


赛瑞特 高压灭菌袋相关产品

附件

## 封口绳

- 取用方便，无须裁剪，直接封口
- 橘红色，醒目标示
- 优于绳子或橡皮筋，柔软性好，易捆绑，缠绕后牢固定型
- 内置镀锌细铁丝，经退火工艺处理，外包胶为聚乙烯
- 用于灭菌袋丢弃前的封口，不得用于蒸汽灭菌中

货号	长度 (mm)	颜色	包装
L0411	300	橘色	500/包

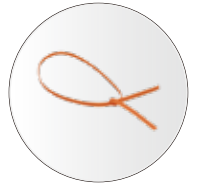

## 封口绳

- 自带切割器，长度可任意裁剪
- 内置镀锌细铁丝，外包胶为聚氯乙烯
- 安全性高，优于绳子或橡皮筋，易捆绑，缠绕后牢固定型
- 可做袋身捆绑，如固定袋内容易倾倒的器具
- 灭菌袋丢弃前封口处理


货号	长度 (m)	颜色	包装
L0412	25	绿色	1卷/盒



## 快速封口绳

- 有止退功能，自锁紧固
- 颜色有橘色或红色可选，方便标记
- 尼龙PA66材质，柔软、韧性好，捆扎力大，防断裂
- 可用于高温蒸汽灭菌，灭菌时要预留袋口，便于蒸汽排放
- 灭菌后可直接拉紧封口绳，绑扎快速，使用非常方便

货号	长度 (mm)	颜色	包装
L0421	246	橘色	250/包
L0422	297	红色	250/包

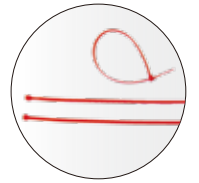

## 封口安全夹

- 可单手操作，取用简单方便
- 完全耐受蒸汽高压121℃灭菌
- 独特的设计，灭菌时随蒸汽压力自动调节，便于蒸汽的渗入与排出
- 安全性高，优于绳子或橡皮筋，易操作
- 优质尼龙材质，弹性大，可重复使用
- 适配于宽度720mm以下Seroat®或其他品牌高压灭菌袋

货号	内径 (mm)	颜色	包装
L0431	φ18	白色	100/包



### 除臭剂

- 有效去除高压灭菌废弃物时释放的恶臭
- 121℃或132℃蒸汽压力下100%溶解
- 胶囊状，方便使用，安全无毒
- 投入一颗即可释放出愉快的清香气味
- 三种味道两种包装规格，便于选择

货号	味道	包装
L0712	苹果味	100/瓶
L0712S	苹果味	50/瓶
L0722	柠檬味	100/瓶
L0722S	柠檬味	50/瓶
L0742	桃子味	100/瓶
L0742S	桃子味	50/瓶



### 桌上型支架

- 表面橘红色环氧树脂涂层钢丝，醒目标示，防锈防腐蚀
- 直径0.31" (8mm) 钢制框架，放置非常稳固，体积小，转移方便
- 表面处理光滑，防止袋子刮划，可121℃蒸汽高温灭菌
- 取放袋子操作方便，是实验台，洁净柜、生物安全柜放置的理想选择
- 可选购支架盖，聚丙烯材质，易安装使用，用于掩盖异味
- #L0310(old)适用于宽度在200mm灭菌袋，例如：M0759、L8501等
- #L0311适用于宽度在200-260mm灭菌袋，例如：L7500、L6501等
- #L0312适用于宽度在300-360mm灭菌袋，例如：L7502、L6502、M0758等

货号	开口尺寸 (mm)	外尺寸 (mm)	包装
L0310(old)	122×83	150×95×218	1/箱
L0311	160×90	200×128×260	1/箱
L0312	180×130	220×160×370	1/箱
L0311-1	支架盖	175×105	1/箱
L0312-1	支架盖	200×145	1/箱



### 落地型支架

- 经济，灵活轻便，折叠收纳节省空间，便于转移和储放
- 镀锌钢材质，坚固耐用，环氧树脂涂层，不易生锈、耐腐蚀
- 底部带有可移动的滴水盘，方便拿取清洗
- 独特配重设计，橡胶防滑垫脚，支撑地面牢固可靠
- 蓝色与橘红色两种可选，便于分类管理
- 带有调节带，开口大小可调，适配不同尺寸灭菌袋
- 适用于Seroat® L7504、L6504、L8505、M0755等高压灭菌袋

货号	外尺寸 (mm)	颜色	包装
L0328B	250×310×690	蓝色	1/箱
L0328R	250×310×690	橘红色	1/箱



#### 落地型支架

- 镀锌冷轧钢材质，电镀涂层，耐腐蚀
- PP塑料盖，防止异味散发
- 底部带有金属脚踏，可轻松开启遮味盖
- 结构简单，所占空间较小
- 适用于Seroat® 宽度在600~900mm高压灭菌袋，例：M0754、L7505、L7506、L8505等系列
- 可选配适配器（#L0326-1），适用于Seroat® 宽度在300~550mm高压灭菌袋例：M0755、L6504、L7504、L8503等系列

货号	外尺寸 (mm)	包装
L0326	350×300×760	1/箱
L0326-1	--	1/箱



#### 可移动型支架

- 底部带有耐磨滑轮，方便推拉移动，方便实用
- 脚踏式开盖，方便省力，避免手部接触
- 钢制支架，防生锈，坚固耐用，不易变形
- 顶部带盖子，掩盖异味和防止袋子脱落
- 后部有挂袋，用于存放预使用的灭菌袋
- 适用于Seroat®灭菌袋中M0754、L7504、L7505S、L7506S等系列
- 可选适配器（#L0327-1），适用于尺寸更小的灭菌袋

货号	外尺寸 (mm)	开口尺寸 (mm)	包装
L0327	450×500×990	350×430	1/箱
L0327-1	--	--	1/箱



#### 生物安全废弃桶

- 特殊聚丙烯材质，耐腐蚀，坚固、结实、防穿刺
- 灵活可控的盖子，可单手开启操作，限制传染性垃圾暴露
- 符合美国OSHA标准29 CFR
- 桶体印刷BIOHAZARD生物危害标志
- 可与Seroat®或其它品牌的高压灭菌袋/生物垃圾袋配套使用
- 可整体放于灭菌锅中，121℃高压蒸汽灭菌
- 主要作用于危险类生物废弃物次级防漏

货号	外尺寸 (cm)	容量 (L)	包装
L0221	φ22×H28	5.5	1/箱
L0222	φ28×H43	19	1/箱
L0223	φ34×H74	57	1/箱





### 高压灭菌桶

- 专为放置灭菌锅设计，两侧内置手柄，方便搬提
- 优质加厚聚丙烯材质，坚韧耐磨，反复灭菌，耐用
- 配套盖子，灭菌后可掩盖生物垃圾异味
- 可持续性耐受121℃蒸汽灭菌30min
- 主要应用于生物废弃物在灭菌中的次级防漏或盛放
- 附带一张带有粘性的“Biohazard”生物危害标示，不可灭菌
- 符合美国OSHA标准29 CFR

货号	外尺寸 (cm)	容量 (L)	包装
L0211	φ28×H46	25	1/箱
L0212	φ36×H58	49	1/箱



### 生物安全废弃桶，桌上型

- 由耐穿刺的聚丙烯材料制成，可做利器盒收集使用
- 坚韧耐磨，可反复高温高压灭菌，经久耐用
- 配有盖子，掩盖生物垃圾异味
- 体积小巧，是放置生物安全柜中的理想选择
- 防漏、防裂、防污染，易清洗
- 附带一张背胶的“Biohazard”生物危害标示（不可灭菌）
- 应用于生物废弃物的次级防漏、盛放和灭菌

货号	尺寸 (mm)	容量 (L)	包装
L0910	φ132×193	2.2	1/包
L0911	φ168×239	4.6	1/包



### 高压灭菌指示胶带

- 适用于蒸汽灭菌方式，121℃（20min）或132℃（6min）
- 线条由白色变为黑色表示验证灭菌通过（#L0511）
- 胶带上显示“STERILIZED”字样验证灭菌通过（#L0512）
- 无乳胶无铅成分，CE标准
- 符合CDC疾病预防控制中心监测灭菌标准

货号	指示方式	尺寸 (mm×m)	包装
L0511	线条	25×50	1/包
L0512	字样	25×12.7	1/包



#### 干热灭菌指示胶带

- 适用于干热灭菌，160℃热空气消毒，大约10分钟变色
- 灭菌时由初始的绿色变为深棕色或黑色，且变色不可逆
- 可清晰的识别物品是否经灭菌处理
- 每片带有背胶，可以黏粘在任何物品上，撕掉无粘胶残留
- 取下后为长方形小片，每片尺寸19×29mm
- 符合ISO: 11140-1, Class 1标准



货号	指示方式	包装
L0521	色块	1000片/卷

#### 搁置盒

- ABS材质，表面光滑，结实、耐用
- 需墙面安装或黏粘背胶，方便取用灭菌袋
- #L0331适用于宽度12"以内的灭菌袋，例如：M0758、L6502、L7500、L8501等
- #L0332适用于宽度16"以内的灭菌袋，例如：M0757、L7502等



货号	外尺寸 (mm)	包装
L0331	330×105×110	1/箱
L0332	440×105×110	1/箱

#### 器具灭菌布袋

- 自然白色，袋身印刷醒目的BIOHAZARD生物危害标记
- 由特殊纤维素/棉丝/双层料工艺制作，防静电，符合易燃织物FFA要求
- 耐受121℃或132℃蒸汽灭菌，易清洗，耐磨性好，抗皱不起球
- 透气性好，蒸汽灭菌更充分，内外压平衡，提升灭菌效果
- 袋口配有收缩封口绳，密封袋口，防交叉污染
- 可接受在100℃的烘箱中干燥，并能保证高效的细菌过滤效率



货号	尺寸 (mm)	包装
L0611	150×300	1只/包
L0612	200×400	1只/包
L0613	300×400	1只/包
L0614	450×400	1只/包
L0615	400×600	1只/包

#### 器械高压灭菌袋

- 易于辨认袋内物品，且高度阻菌，有效保证灭菌效果
- 胶带密封型，容易密封
- 带有灭菌指示，显示清晰稳定，经高压蒸汽灭菌后变色
- 也可热封口，充分灭菌后并长期无菌保存
- 易开口，开启方便，防污染袋内物品
- 多种尺寸可选，满足不同灭菌物品

货号	尺寸 (mm)	包装
L1201	89×133	200/盒
L1202	89×229	200/盒
L1203	133×254	200/盒
L1204	191×330	200/盒
L1205	254×356	200/盒
L1206	305×432	200/盒



#### 耐高温手套

- 100%纯棉，毛圈织物，预缩水，可洗涤
- 最高耐高温达 232°C (450°F)
- 完全阻燃与极佳的耐热性
- 柔软性高，取放实验物品灵活方便
- 橘红色，易于安全操作标示的颜色
- 是操作灭菌锅、烘箱等高温设备的理想选择

货号	袖口长度 (mm)	总长度 (mm)	包装
L1101	127	330	2只/包












# 备忘录

A series of horizontal dashed lines for writing.



# 赛瑞特实验室生物废弃物用袋使用指引

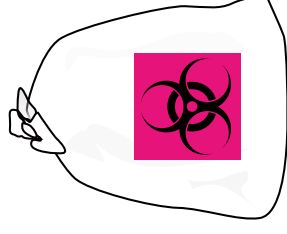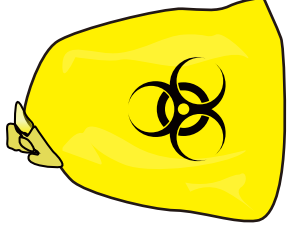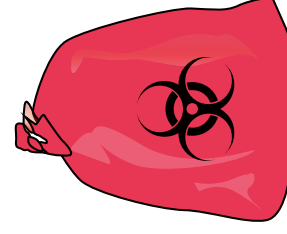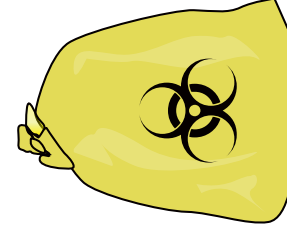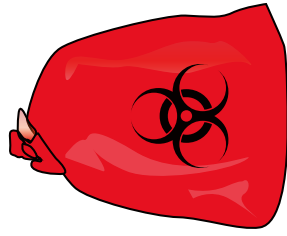

## M07系列

盛放 (121°C 蒸汽灭菌)

适用于制药、生物、食品工业实验室的所有生物废弃物盛放或灭菌处理 (仅限常规废弃物与非尖锐性耗材, 如培养皿、培养瓶、试管和少量阳性样品液等)

## L65系列

121°C 蒸汽灭菌

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物实验室所有常规废弃物, 如: 培养皿、动物笼、移液管、吸头、培养瓶、培养基、弱酸碱样品液等

## L75系列

121°C 蒸汽灭菌

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌, 如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等

## L85系列

134°C 蒸汽灭菌

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有生物废弃物或预消毒器具的灭菌, 如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品、实验笼、试管架、敷料镊等器具耗材

## L95系列

146°C 空气灭菌

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、生物实验室所有常规废弃物的热空气灭菌或高压蒸汽灭菌, 如: 实验笼、试管架、敷料镊等金属器具或培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等废弃物

## 实验室生物废弃物蒸汽高压灭菌处理



## 实验室生物废弃物集中储放



## 外部焚烧或掩埋处理

更健康

更环保

更科学

